

SEC-2F 光電気化学フローセル



SEC-2FはSEC2000スペクトロメーターシステムと直接接続ができるフローセルです。このフローセルにより反応システムの*in situ*測定をより簡単に行うことができます。

SEC-2F

検索

『基本セットアップ編』


『シリンジポンプ接続編』

『デモ編』

you tube でSEC-2Fの動画をみよう



Ptグリッド電極(別売)
他材質グリッドやITOもあります。

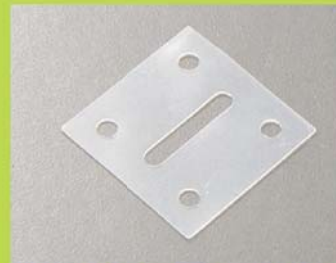


付属のシリコンガスケット500 μm
他の厚さも用意しております。



RE-3V 参照電極(別売)

光の経路

光ファイバーから出てきた光は石英窓を通過してインジェクションされた溶液と電極面の反応を捉えて分光器へ届きます。

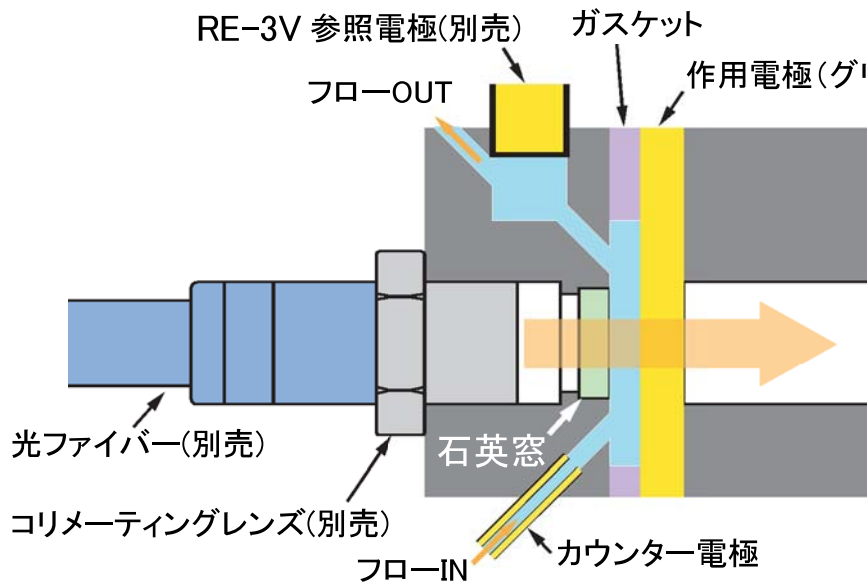

SEC2000なら直接接続が可能

分光器への接続は

光ファイバーを使って分光器に接続



ファイバーの接続にはコリメーティングレンズ(別売)が必要になります。

SEC2000やオプションの情報をホームページでご覧下さい

www.bas.co.jp

光と電気化学計測 > SEC-2F 光電気化学フローセル

詳細はお問合せ下さい。
東京営業所 TEL: 03-3624-0367
大阪営業所 TEL: 06-6308-1867



ビー・エー・エス株式会社

広告ナンバー K0069

E-mail: sp1@bas.co.jp